

AwEASY



特長

- 信頼性の高い AwQuick 機能による測定
標準測定時間 4-5 分
- iOS/Android 用スマートフォンアプリで簡単操作
- 1.2in LCD カラーディスプレイ
- ワイヤレス充電対応

アプリケーション

- 食品産業
- 製薬業界
- 化学薬品工業
- 化粧品業界

小型でポータブル性に優れた水分活性測定器

AwEasy は、ポータブル性に優れた Bluetooth デバイスの水分活性測定器です。iOS および Android OS 用の無料 AwEasy アプリを介してスマートフォンで操作することができます。機器には、小型ディスプレイ、インジケータの役割をもつライトリング（「go」または「no go」）、ワイヤレス充電器が付属しているので取り扱いが簡単です。測定結果はすべてアプリに保存され、PDF レポートを自動で作成します。

Measurement

- AW Quick 機能で時短測定（標準 4-5 分）
- 標準測定モードでの測定 50 分

Connecting

- Bluetooth とアプリで簡単接続
- ワイヤレス充電用アタッチメント

APP Functions

- 測定設定と測定モードの変更
- 測定結果の自動レポート作成・保存機能
- 測定レポートのダウンロード
- ファームウェアアップデート

Stable Housing

- アルミニウム、ABS、ステンレスなどの堅牢な素材を使用
- トップディスプレイとライトリング・インジケータ

ワイヤレス充電用アタッチメント



AwEasy APP





ACCESSORIES

サンプルホルダーとサンプルコンテナ

サンプルホルダーとサンプルコンテナは、優れた保持力と温度安定性を実現します。WP-40TH は、ウォーターバスに取り付けることができます。使い捨てのサンプルコンテナは、適切なサンプル量を確実にサンプルホルダーにセットすることができ、ホルダーがサンプルに直接触れることを防ぐことができ、汚れやクロスコンタミネーションを防止します。また、サンプルコンテナはサンプルの収集と保管に便利です。

オーダーコード	WP-14-S	WP-40	WP-40TH	PS-14	PS-40
					
タイプ	サンプルホルダー			サンプルコンテナ	
対応	PS-14	PS-14 / PS-40		WP14-S / WP40 / WP40TH	WP-40 / WP-40TH
高さ	14 mm	40 mm		14 mm	40 mm
材質	V2A steel		Brass, nickel-plated		
重量	350 g	1250 g	1550 g	100 pc	100 pc

技術仕様

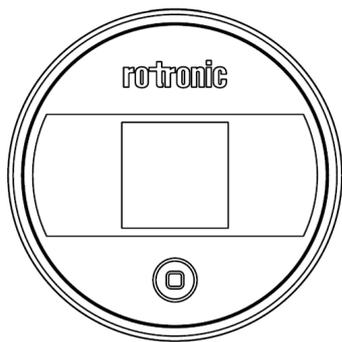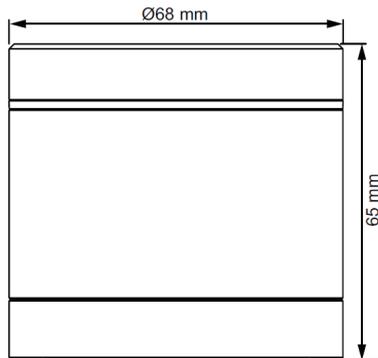

センサー	HYGROMER WA-1
精度@ 23 ± 5 °C	± 0.008 aw / 0.8 %RH / ± 0.1 K
動作環境	0...70 °C / 0...100 %RH
保管環境	-10...70 °C / 0...100 %RH
表示単位	aw, %RH, °C
ステータスライト	有
長期安定性	< 1 %RH / 年 (通常の使用環境下)
AwQuick モード	有
ディスプレイ	1.2in LCD カラーディスプレイ
ボタン	マルチボタン
トレンド表示	有
時計	リアルタイムクロック 全ての測定にタイムスタンプを付与
バッテリー容量	500 mAh
電源	5 V DC 1.5 A 7.5 W max (AC アダプター)
電源プラグ	US / EU & UK
USB ケーブル	USB-A to USB-C
ファームウェアアップデート	アプリを介して実施
HygroSoft/HygroLab 互換	なし
警告音	なし
演算値	なし
寸法	Ø68 x 65 mm
材質	アルミニウム, ステンレススチール
重量	600 g
CE マーク	CE 2014/30/EU
IP 保護	IP65

日本総発売元

PSTジャパン株式会社

本社 東京都武蔵野市中町1-19-18 武蔵野センタービル 〒180-0006

TEL : 0422-50-2600 FAX : 0422-52-1700

大阪 大阪府吹田市豊津町11-34 第10マイダビル 〒564-0051

営業所 TEL : 06-6378-2600 FAX : 06-6330-1702

e-mail : jp.info@processSensing.com

www.processSensing.co.jp

代理店

